


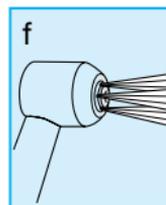
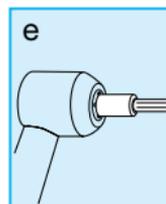
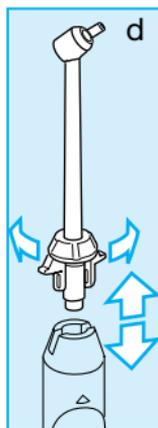
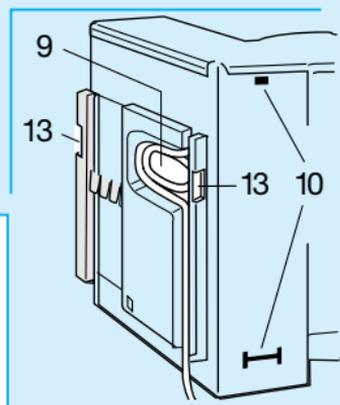
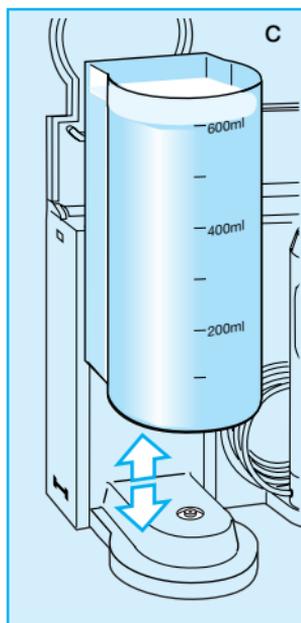


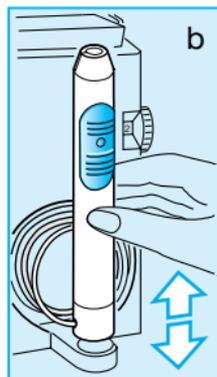

**MARQUE: ORAL B**  
**REFERENCE: WATERRJET + 700**  
**CODIC: 4205839**

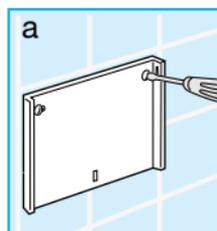

**NOTICE**  
↓

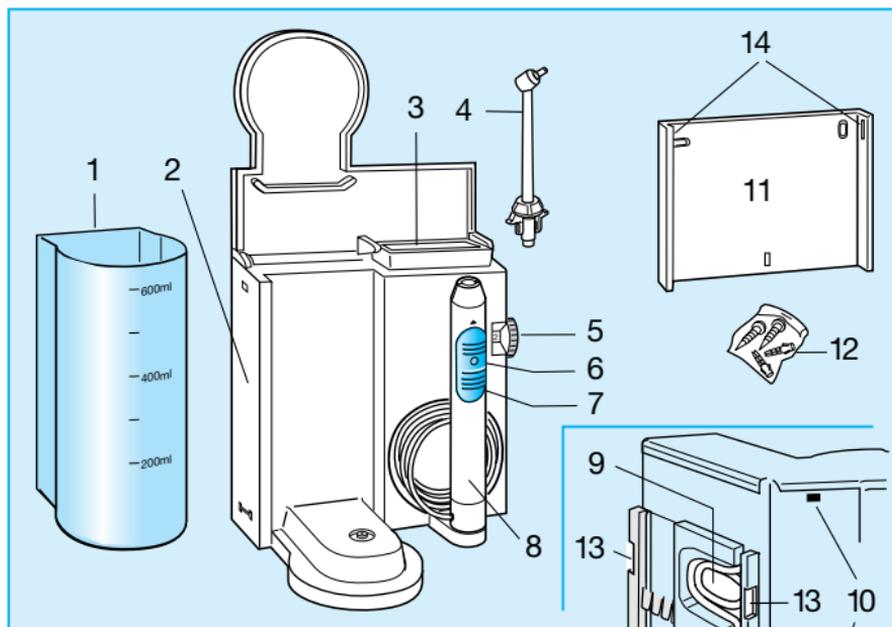

# Français

Les technologies de pointe de fabrication de nos produits réunissent au plus haut niveau qualité, fonctionnalité et design. C'est ainsi que vous pourrez pleinement apprécier ce nouvel appareil Braun Oral-B.

L'hydropulseur Braun Oral-B Plak Control élimine les débris alimentaires des espaces interdentaires et effectue un massage efficace des gencives. Pour cette raison, il doit toujours être utilisé après le brossage.

Avant d'utiliser tout appareil Braun Oral-B, nous vous recommandons de lire attentivement la notice d'utilisation suivante afin de pouvoir l'utiliser correctement et en toute sécurité.

## Précautions d'usage

Vérifiez le fil électrique régulièrement. En cas de problème, débranchez immédiatement le bloc-moteur ② et portez l'appareil dans un centre service agréé Braun. En cas d'endommagement ou de nonfonctionnement, le bloc-moteur ne doit plus être utilisé.

## Description de l'appareil

- ① Réservoir
- ② Bloc-moteur
- ③ Compartiment extractible de rangement de canules ④
- ④ Quatre canules adaptables avec repères de couleur
- ⑤ Réglage de la pression d'eau
- ⑥ Commande de pression maximale de l'eau située sur le commutateur ⑦
- ⑦ Commutateur
- ⑧ Manche de l'irrigateur
- ⑨ Compartiment de rangement du cordon
- ⑩ Connexions pour adapter le chargeur d'une Braun Oral-B Plak Control
- ⑪ Support mural
- ⑫ 2 vis avec chevilles

## Support mural

Votre hydropulseur est livré avec un support mural ⑪ pour le bloc-moteur ②. Pour le montage (a), utilisez les vis et les chevilles ⑫ fournies avec l'appareil. Les deux rainures ⑬ au dos du bloc-moteur ② se glissent dans les ergots ⑭ du support mural ⑪. Le compartiment de rangement du fil électrique ⑨ vous permet d'utiliser seulement la longueur de fil nécessaire pour atteindre la prise de courant.

## Caractéristiques techniques

Alimentation: 220 – 240 Volt (-) ac, 50 – 60 Hz  
Consommation: 20 W (peut être branché sur une prise « rasoirs »)  
Temps d'utilisation maximum: 20 minutes  
Temps de refroidissement: 2 heures  
Contenance: environ 600 ml  
Nombre d'impulsions: environ 500 à 1000 impulsions par minute, réglable à tout moment

## Commutateur

Mettez en marche l'hydropulseur en poussant le commutateur ⑦ vers le haut. Arrêtez-le en faisant glisser le commutateur vers le bas jusqu'à sa position initiale (c'est-à-dire en dessous de la flèche).

La force de la pression de l'eau et le nombre des impulsions sont réglées électroniquement de façon continue à l'aide du réglage ⑤: 2 = faible; 8 = fort.

Appuyez sur le bouton ⑥ du commutateur ⑦ pour obtenir la pression maximale indépendamment du réglage choisi (de 2 à 8). Grâce à cette commande, les débris alimentaires les plus résistants pourront être éliminés des espaces interdentaires.

## Pour commencer

Après avoir branché l'appareil, retirer le réservoir ① et remplissez-le avec de l'eau tiède. Remettez le réservoir fermement en place (c). Avant de l'utiliser pour la première fois, laissez l'eau circuler complètement dans l'appareil.

Détachez le manche ⑥ du support magnétique (b), le tenir au-dessus du lavabo et mettez l'appareil en marche.

## Utilisation

Remplissez le réservoir ① avec de l'eau en ajoutant un bain de bouche si vous le désirez. Remplacez-le fermement sur le socle (c). Placez une des canules ④ en l'enclenchant sur la poignée ⑧ (d) et tournez-la dans la direction de votre choix.

Choisissez la pression et le nombre d'impulsion désirée ⑤. Il est préférable de commencer par une pression douce (position 2), surtout si vos gencives ont tendance à saigner ou si l'hydropulseur est utilisé par des enfants.

Pour éliminer les débris alimentaires tenaces, appuyez sur le bouton ⑥ afin d'obtenir une pression maximale (correspondant à la position 8). Penchez-vous au dessus du lavabo et dirigez la canule vers vos dents. Mettez l'appareil en marche en poussant le commutateur ⑦ vers le haut. L'eau sous pression sort en quelques secondes. Gardez la bouche entrouverte pour permettre à l'eau de s'écouler dans le lavabo.

## Mono et multi-jets

Le jet de l'hydropulseur a deux positions possibles, l'une pour éliminer les résidus alimentaires des espaces interdentaires, l'autre pour masser les gencives.

**Position mono-jet:** Mettez la canule en position (e) afin de nettoyer les dents et les espaces interdentaires et d'éliminer les résidus alimentaires.

**Position multi-jets:** Mettez la canule en position (f) pour masser les gencives et les maintenir en bonne santé.

Commencez en position mono-jet. Dirigez le jet vers les dents et vers les espaces interdentaires en particulier. Massez ensuite les gencives en position multi-jets.

Le changement de position du jet se fait très facilement en exerçant une pression sur la tête de la canule. Pour éviter les éclaboussures, arrêtez l'appareil lorsque vous voulez changer de position. Remettez ensuite l'appareil en marche à l'aide du commutateur ⑦.

## Après utilisation

N'arrêtez l'appareil que lorsque le réservoir est complètement vide. Des bactéries pourraient se développer dans l'eau restante si vous n'utilisiez pas l'appareil pendant un certain temps.

Après emploi, remplacez la poignée ⑧ sur le socle magnétique (b). Rangez les canules adaptables ④ dans le compartiment extractible ③.

## Entretien

Nettoyez le bloc-moteur ② avec un linge humide. Essuyez bien la poignée ⑧. Le réservoir d'eau ① et le compartiment extractible de rangement des canules ③ peuvent être nettoyés en lave-vaisselle.

## Complément

Votre hydropulseur Braun Oral-B Plak Control peut devenir très facilement un combiné d'hygiène dentaire complet: Les connexions ⑩ situés sur le côté du bloc-

moteur ② permet de recevoir la brosse d'hygiène contre la plaque dentaire Braun Oral-B Plak Control. Les deux appareils forment alors un combiné complet alimenté seulement par le cordon de l'hydropulseur. Vous trouverez le chargeur pour la brosse d'hygiène contre la plaque dentaire (type 4723) dans tous les points de vente Braun.

#### Sauf modifications

Cet appareil est conforme aux normes européennes relatives à la limitation des perturbations radioélectriques (Directives Communautaires 89/336).

**Oral-B®**

**PRO**

powered  
by **BRAUN**

**TRIZONE**  
**600-800**












<b>DE</b>	<b>AT</b>	<b>00 800 27 28 64 63</b>
<b>CH</b>		<b>08 44 - 88 40 10</b>
<b>GB</b>		<b>0 800 731 1792</b>
<b>IE</b>		<b>1 800 509 448</b>
<b>FR</b>		<b>0 800 944 803</b> (appel gratuit depuis un poste fixe)
<b>BE</b>		<b>0 800 14 592</b>
<b>LU</b>		<b>800 21172</b>
<b>ES</b>		<b>901 11 61 84</b>
<b>PT</b>		<b>808 20 00 33</b>
<b>IT</b>		<b>800 124 600</b>
<b>NL</b>		<b>0800-4 45 53 88</b>
<b>DK</b>		<b>70 15 00 13</b>
<b>NO</b>		<b>22 63 00 93</b>
<b>SE</b>		<b>020 - 21 33 21</b>
<b>FI</b>		<b>020 377 877</b>
<b>GR</b>		<b>800 801 3457</b>

**Internet:**

[www.oralb-blendamed.de](http://www.oralb-blendamed.de)  
[www.oralb.com](http://www.oralb.com)  
[www.braun.com](http://www.braun.com)  
[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)

Braun GmbH  
Frankfurter Straße 145  
61476 Kronberg/Germany

**Charger type 3757**  
**Handle type 3756**

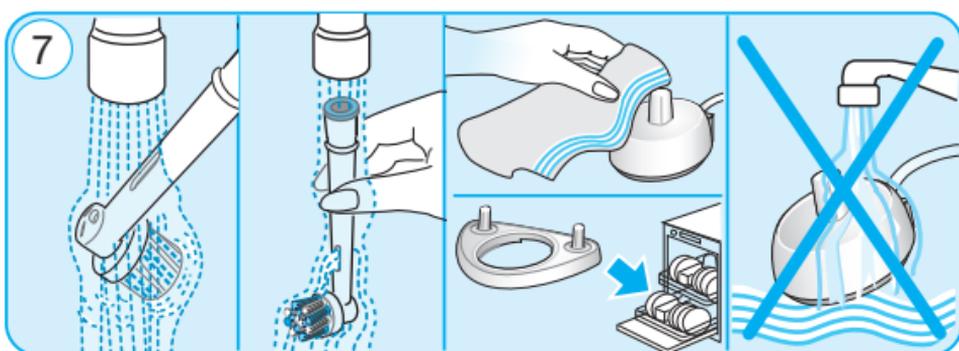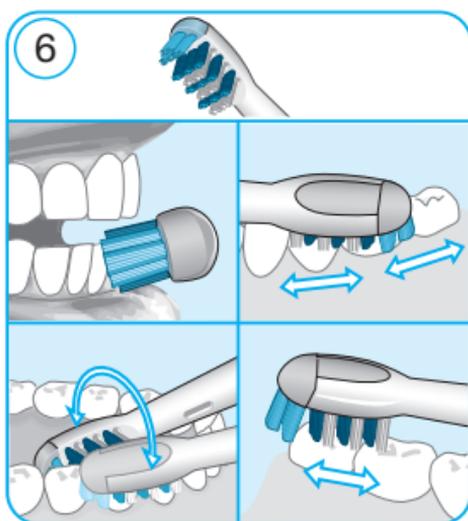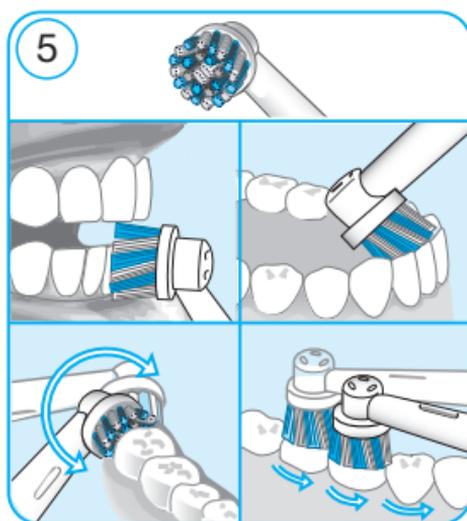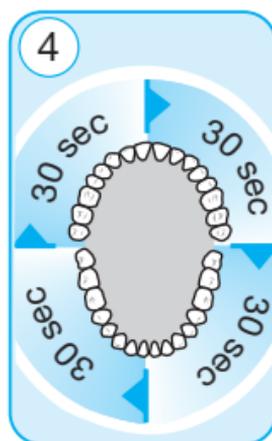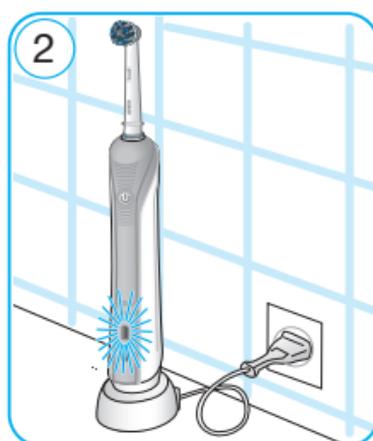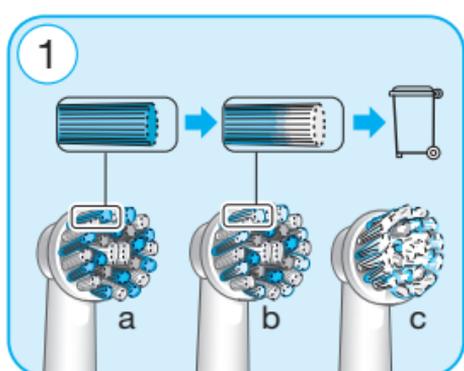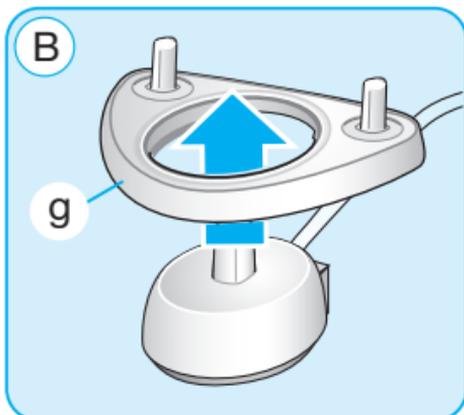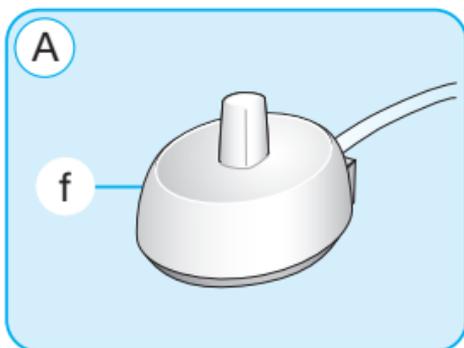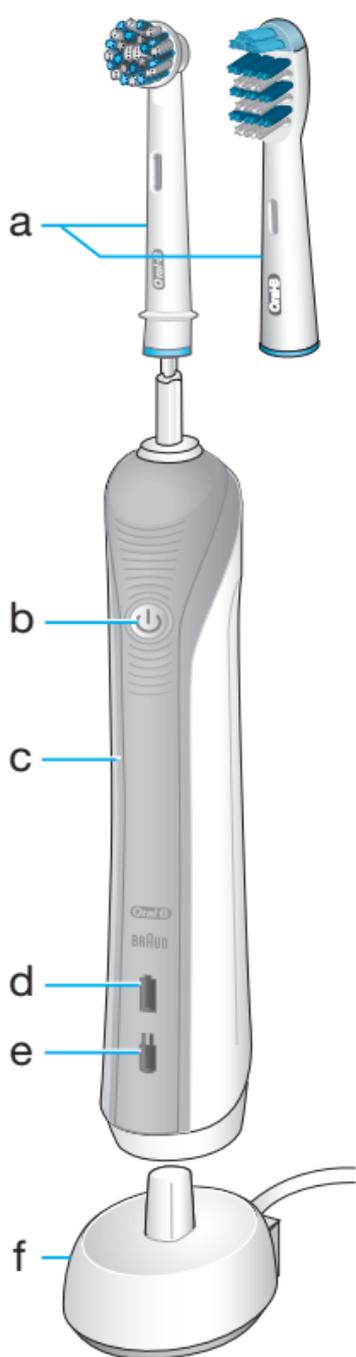

## Français

Bienvenue chez Oral-B !

Veuillez lire le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

### **IMPORTANT**

- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation ne soit pas endommagé. Si le cordon est endommagé ou fonctionne mal, il ne doit plus être utilisé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, rappez le chargeur dans un Centre service Agréé Oral-B. Ne cherchez pas à réparer, ni à modifier le produit. Cela pourrait être cause d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 3 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 3 à 14 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre, et qu'elles ont compris les risques encourus par l'utilisation de l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être assurés par des enfants.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utilisez ce produit uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans cette notice. N'utilisez pas d'accessoires ou de chargeurs autres que ceux recommandés par le fabricant.

#### ATTENTION

- En cas de chute de l'appareil, la brosette doit être remplacée avant toute nouvelle utilisation, même si aucune détérioration n'est visible.
- Évitez tout contact du chargeur avec de l'eau ou tout autre liquide. Ne posez pas et ne rangez pas le chargeur dans un endroit d'où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un lavabo. Ne ramassez jamais le chargeur s'il est tombé dans l'eau. Débranchez l'appareil immédiatement.
- Ne démontez pas le produit, sauf pour retirer du corps de brosse la batterie en fin de vie. Lors du retrait de la batterie du corps de brosse à dents, veillez à prendre de soin de ne pas court-circuiter les bornes positive (+) et négative (-).
- Pour débrancher, tirez sur la prise elle-même et jamais sur le cordon. Ne touchez pas la prise d'alimentation avec les mains mouillées. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Si vous êtes actuellement suivi(e) pour des problèmes bucco-dentaires, demandez l'avis de votre dentiste avant d'utiliser cet appareil.
- Cette brosse à dents est un appareil de soin dentaire personnel qui n'est pas destiné à être utilisé par plusieurs patients dans un cabinet dentaire.

#### Description

- a Brossette
- b Bouton marche/arrêt (sélection des modes sur le modèle 800)
- c Corps de brosse
- d Indicateur de charge
- e Indicateur de faible charge
- f Chargeur
- g Base de rangement pour brosettes (selon le modèle)

#### Spécifications :

Pour les spécifications liées au voltage, merci de vous référer aux indications situées sous le chargeur.

#### Branchement et chargement

Votre brosse à dents est dotée d'un corps de brosse étanche, qui est d'une sécurité électrique absolue et est conçu pour être utilisé dans une salle de bain.

- Branchez le chargeur (f) ou l'unité de chargement (g) (image A/B) dans une prise électrique et placez le corps de brosse (c) sur le chargeur.
- L'indicateur de charge vert (d) clignote indiquant que le corps de brosse est en cours de charge. Quand la batterie est complètement chargée, l'indicateur de charge s'éteint. Une charge complète peut prendre jusqu'à 22 heures et offre une autonomie allant jusqu'à 7 jours de brossage régulier (2 brossages de 2 minutes chaque jour) (image 2).  
Note : Lorsque la batterie est très déchargée, il se peut que le voyant vert ne s'allume pas immédiatement ; cela peut prendre jusqu'à 10–15 minutes.
- Si la batterie est faible, l'indicateur de charge (e) clignote en rouge pendant quelques secondes après l'arrêt de la brosse.
- Pour une utilisation quotidienne, le corps de brosse peut rester posé sur le chargeur pour que la brosse à dents conserve sa pleine capacité. Il n'y a aucun risque de surcharge.
- Afin de conserver la pleine capacité de la batterie rechargeable, débranchez le chargeur et déchargez complètement le corps de brosse en l'utilisant normalement au moins une fois tous les 6 mois.

#### Utilisation de la brosse à dents

##### Technique de brossage

Humectez la brosette et appliquez du dentifrice. Pour éviter les éclaboussures, placez la brosette sur vos dents avant de mettre la brosse à dents en marche (image 3). Lorsque que vous vous brossez les dents avec une des **brosettes Oral-B à oscillo-rotations**, déplacez doucement la brosette d'une dent à l'autre, en passant quelques secondes sur la surface de chaque dent (image 5).

Quand vous utilisez la **brosette « TriZone »**, placez la brosse à dents contre vos dents avec une petite inclinaison vers la gencive. Appliquez une légère pression et commencez à broser avec des mouvements de va-et-vient, comme vous le feriez avec une brosse à dents manuelle (image 6).

Avec toutes les brosettes, commencez par broser les surfaces extérieures, puis intérieures et enfin les surfaces de mastication. Assurez-vous de broser avec autant de soin les quatre quadrants de votre bouche.

N'hésitez pas à consulter votre dentiste pour qu'il vous indique la technique de brossage vous correspondant le mieux.

Lors des premiers jours d'utilisation, il est possible que les gencives saignent légèrement. Normalement le saignement devrait disparaître après quelques jours. Si le saignement persiste après deux semaines, contactez votre dentiste. Si vous avez des dents ou des gencives sensibles, Oral-B vous conseille de vous broser les dents en mode « Douceur » (selon le modèle).

##### Modes de brossage (selon le modèle)

- « Propreté » – Mode standard pour un nettoyage quotidien
- « Douceur » – Nettoyage des zones sensibles en douceur mais en profondeur

Comment passer d'un mode à un autre :

Votre brosse à dents se met automatiquement en marche en mode « Propreté ». Pour passer aux autres modes, pressez de nouveau le bouton marche/arrêt. Si vous souhaitez éteindre votre brosse à dents depuis le mode « Propreté », pressez en continu le bouton marche/arrêt jusqu'à l'arrêt du moteur.

##### Capteur de pression

Pour un résultat optimal votre brosse à dents est équipée d'un capteur de pression. Si la pression exercée est trop forte, le mouvement continue, mais les pulsations s'arrêtent. Vous entendrez ce changement au bruit différent pendant le brossage.

##### Minuteur Professionnel

De brefs arrêts répétés toutes les 30 secondes, vous signalent qu'il est temps de passer à un autre quadrant de votre bouche (image 4). Des arrêts plus prononcés vous indiquent la fin du

temps de brossage de 2 mn, recommandé par les dentistes. Le temps de brossage écoulé est mémorisé, même en cas de bref arrêt de la brosse à dents pendant le brossage. Il ne se remet à zéro qu'après une pause de plus de 30 secondes.

## Brossettes



### Brossette Oral-B Cross Action

C'est notre brosette avec la technologie la plus avancée. Les poils inclinés permettent un brossage précis et ils décollent et retirent la plaque.

Toutes les brosettes Oral-B possèdent des poils bleus INDICATOR® qui vous aident à identifier quand la brosette doit être remplacée. Dans le cadre d'une utilisation rigoureuse, deux fois par jour pendant deux minutes, les poils bleus se décolorent au bout d'environ 3 mois indiquant le besoin de remplacer la brosette. Si les poils s'écartent avant leur décoloration, il se peut que vous exerciez une pression trop forte sur vos dents et vos gencives (image 1).

Il est déconseillé d'utiliser les brosettes Oral-B FlossAction et Oral-B 3D White avec des appareils dentaires. Dans ce cas nous recommandons plutôt la brosette Oral-B Orthodontic (Kit Ortho Care Essentials) qui est spécifiquement conçue pour l'hygiène des dents appareillées.

## Recommandations d'entretien

Après utilisation, rincez la brosette pendant quelques secondes sous l'eau courante avec le corps de brosse en marche. Ensuite, arrêtez le fonctionnement retirez la brosette et rincez-les séparément sous l'eau courante puis séchez-les. Avant de nettoyer l'unité de recharge, commencez par la démonter. De temps en temps, nettoyez aussi le chargeur avec un linge humide, ne jamais placer le chargeur dans l'eau ou au lave-vaisselle. En revanche, le porte-brossette (g) supporte un lavage au lave-vaisselle (image 7).

Sujet à modification sans préavis.

## Respect de l'environnement

Cet appareil contient des batteries rechargeables. Pour la protection de l'environnement, une fois l'appareil en fin de vie, ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Veuillez le déposer dans un Centre Service Agréé Oral-B Braun ou dans des lieux de collecte adaptés mis à votre disposition dans votre localité.



## Garantie

Cet appareil bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, nous prendrons gratuitement à notre charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé. Cette garantie couvre tous les pays dans lesquels cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur agréé.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate et l'usure normale, particulièrement pour les brosettes, ainsi que les défauts ayant un impact négligeable sur la valeur ou le fonctionnement de l'appareil. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun ou si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour bénéficier des prestations pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil complet avec votre preuve d'achat à un Centre service agréé Oral-B Braun.

## Satisfait ou remboursé : Le défi 30 jours

Essayez votre brosse à dents Oral-B pendant 30 jours. Si vous n'en êtes pas satisfait à 100%, nous vous rembourserons intégralement. Sans poser de question. Garanti.

Pour des achats en France

1. Pour obtenir le remboursement intégral de votre achat (y compris les frais de retour de la brosse), veuillez renvoyer par Colissimo\* dans son emballage d'origine dans un délai de 30 jours maximum après la date de votre achat accompagné de :
  - la brosse avec tous ses accessoires
  - vos nom, prénom et adresse complète sur papier libre
  - l'original du ticket de caisse ou la copie de la facture en entourant les références et le prix de votre achat concerné par l'offre ainsi que la date et le nom du magasin
  - 1 RIB ou 1 RIP

\*tarif forfaitaire de 7€

2. Envoyez le tout sous 30 jours maximum (cachet de la poste faisant foi) après la date d'achat à l'adresse suivante :  
Custom Promo  
Offre n°2319  
Satisfait ou remboursé Oral-B Défi 30 jours  
13102 Rousset Cedex  
France

Vous recevrez un virement bancaire du montant de votre achat et des frais d'envoi sous 6 à 8 semaines environ.  
Une offre maximum par foyer (même nom et même adresse).  
Toute demande raturée, illisible, incomplète ou erronée (y compris ticket de caisse découpé, raturé, scanné ou photocopié) ne pourra être traitée. Offre valable en France métropolitaine (Corse incluse). Offre non cumulable avec toute offre promotionnelle sur le(s) même(s) produit(s).  
Toute utilisation frauduleuse de cette offre pourrait faire l'objet de poursuites.

Les informations que vous nous communiquez sont destinées à notre fichier Consommateurs, à des fins de prospection et de fidélisation et pour vous faire éventuellement parvenir des informations sur nos produits ou ceux d'autres sociétés. Elles pourront être temporairement transférées hors Union Européenne (Maroc, Sénégal) pour qualification. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous au responsable du traitement :

Procter & Gamble France SAS,  
Service du Consommateur – 92665 Asnières Cedex.

Procter & Gamble France SAS – 391 543 576 RCS Nanterre –  
Capital social de 325 505 € –  
163 quai Aulagnier 92200 Asnières sur Seine